

## Inhalador RespiClick® [RespiClick® Inhaler]

Medicamentos: : ProAir® (sulfato de albuterol), Air Duo® (fluticasona/salmeterol)



ProAir® (sulfato de albuterol)



Air Duo® (fluticasona/salmeterol)

El RespiClick es un inhalador que lleva un medicamento en polvo seco a sus pulmones.

- **No lo use con una cámara de retención con válvula o espaciador.**
- **No agite el RespiClick**
- **No cebe el RespiClick** antes de usarlo.
- Asegúrese de que la tapa esté cerrada antes y después de cada dosis.
- No quite la tapa hasta que esté listo para la dosis.

### Cómo usar el inhalador RespiClick

1. Revise el contador en el inhalador antes de usarlo
2. Abra la tapa.



- Sostenga el inhalador en posición vertical mientras abre la tapa por completo.
- **Abra la tapa todo el trayecto hasta que escuche un “CLIC”.**
- Ahora el RespiClick está listo para usar.
- Mire hacia el lado opuesto del RespiClick y exhale todo el aire. **No exhale en la boquilla del inhalador.**

3. Inhale



- **No deje que sus labios o dedos bloqueen la ventilación por encima de la boquilla.**
- Respire profundo y rápido hacia adentro.
- Aguante la respiración unos 10 segundos
- Retire el inhalador de su boca y verifique el contador en la parte posterior del inhalador para asegurarse de que recibió la dosis.

4. Cierre la tapa




- **Siempre cierre la tapa** después de cada inhalación para que su inhalador esté listo para su próxima dosis
- Si necesita otra dosis, cierre la tapa y repita todos los pasos

## Cómo limpiar el RespiClick

- **No lave, tampoco ponga ninguna pieza del RespiClick en agua.**
- Lave la boquilla con una toallita limpia y seca y un hisopo.

## Más Información

- Si se rompe la tapa, ya no podrá usar el inhalador y deberá comprar uno nuevo.
- Almacénelo en una zona seca, a temperatura ambiente, con la tapa cerrada. No lo mantenga en un lugar que sea demasiado caluroso o demasiado frío.
- Cuando use un inhalador de polvo seco, es probable que no le encuentre sabor al polvo y no sienta el medicamento que le están administrando.
- Hay un contador en la parte posterior del inhalador. Cuando el contador marque 20, debe llamar a la farmacia para reponer la receta.
- Cuando el contador marca 0, el RespiClick está vacío y debe desecharse y reemplazarse por un RespiClick nuevo.

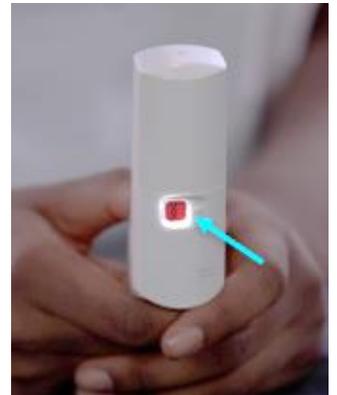

**Para ver un video de como usar el Inhalador RespiClick, escanee el siguiente código QR.**



<https://bit.ly/3OrRAk5>

childrenscolorado.org

**Autor: Educación sobre el asma | Aprobado por el Comité de Educación para el Paciente | Válido hasta 2026**

La información presentada a continuación tiene como propósito únicamente fines educativos. No tiene por objetivo reemplazar el consejo de su médico personal ni diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. La información no debe utilizarse en lugar de una visita, llamada, consulta o consejo de su médico o de otro proveedor de atención de la salud.